

擴視機



常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llaims.com.tw

新品上市

Topolino Tablet 平板式遠近擴視機

德國 Reinecker 公司四十年來致力於產品創新，將微軟平板電腦與其優異的鏡頭系統結合，完成 Topolino Tablet 這款具多媒體功能的遠近擴視機。

Topolino Tablet 是一款緊湊型多媒體攝像系統，支援學生、學生和專業人士輕鬆完成任務。這是一款 13 英寸 Windows 平板電腦，預裝了放大和文本識別軟體，並配有可摺疊支架，可在其上安裝旋轉傾斜距離攝像頭。寫作、閱讀文本、查看圖片、查看物體、遠距離觀看等都可以毫不費力且充滿樂趣地完成。分屏功能可在螢幕上同時顯示兩個不同的圖像，例如遠距離攝像頭和內部攝像頭。放大倍率和要顯示的細節可以通過在觸摸屏上滑動來調整。由於集合了具有朗讀功能的文字識別功能，您可以拍攝文本照片並按兩下要大聲朗讀的文字的所需部分。基於 Windows 操作系統，Topolino Tablet 可以升級為帶有滑鼠和鍵盤的成熟移動工作站，以及所有常見的辦公應用程式 and 輔助軟體，如 SuperNova。



功能與規格	Topolino TABLET
螢幕	13" 多點觸控 LCD
倍率	1x ~ 60x
閱讀支架	鋁合金材質，可收折
望遠模式	Yes，光學變焦攝影鏡頭
文字辨識	Yes (英、西、德等多國語言)
系統	Window 10 Home, 4G RAM
儲存容量	128Gb
高對比色彩	10 種
進階功能	畫面亮度可調整、輔助燈源亮度可調、省電模式、影像旋轉、儲存、攝像
插孔	USB-A; USB-C; 耳機
重量	3000 公克
電池	充電 1.5 小時；使用 2.5 小時

常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llaims.com.tw

新品上市

LVI ML TAB 平板式遠近擴視機

完整的解決方案

這個以微軟 Surface Pro 的平板電腦為平台的擴視機，配備 13 英寸螢幕，提供用戶一個完整的移動解決方案。內建相機可作為放大鏡及內建 OCR 使用；高畫質外置式攝像頭提供更高品質遠近影像。為使用人提供高效而富有創意的日常生活。

連接和溝通

MagniLink TAB 可輕鬆連接到您的 Wi-Fi 或藍牙裝置；互聯網和其他應用程式只需點擊一下，MagniLink TAB 即可輕鬆與世界其他地方交流。

靈活性

MagniLink TAB 有適合低視力使用的觸控按鈕。或者也可以通過手勢控制設備或連接藍牙鍵盤並控制它熱鍵。

朗讀文字

包括高性能軟件，並使用內置的 OCR 和 TTS (文本到 Speech) 您的文字可以被朗讀。一些不同的查看模式可用於提高閱讀速度，閱讀耐力和更輕鬆的閱讀。

真正的移動該裝置

可折疊且重量輕簡單快速的啟動——您幾乎可以立即開始工作。非常適合在學校環境中使用



功能與規格	ML TAB
螢幕	13" 十點觸控 LCD
倍率	0.9x ~ 50x
閱讀支架	金屬材質，可收折
望遠模式	鵝頸式外接式高畫質光學變焦攝影鏡頭
文字辨識	Yes
系統	Window 11 Home ; 8G RAM ; CPU i5
儲存容量	128Gb
高對比色彩	12 種
進階功能	文字辨識、畫面儲存、畫面凍結、截圖修改、攝錄影等。
插孔	USB-C*2
重量	約 3700 公克

常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llaims.com.tw

新品上市

Acesight VR 穿戴式遠近擴視機

Acesight VR 是當今畫質最佳的穿戴式擴視機之一。它採用 Sony 的 4800 萬畫素鏡頭，具有 60fps 影格率，動態影像較不易產生殘影，大大減輕使用者眼睛的疲累感。

Acesight VR 也是坊間唯一採用無線遙控器操作的穿戴式機種。一來操作時不會干擾機身的穩定性；二來，大型式的操作搖桿及浮凸按鍵有絕佳的觸感，使得不易誤觸按鍵，更容易上手。

Acesight VR 非常適合視野缺損的患者使用，它可將視窗位置調整到患者的視野區，此後患者不必再為了尋找視野而歪頭或斜眼，減輕身體上的不適。

Acesight VR 使用時無須長時間握持，更沒有使用空間上的限制。空出您的雙手，做您自己喜歡的事情或娛樂，無論演奏樂器、欣賞電視電影、縫補衣物、模型裝配，不再被視力問題所困擾。盡情享受美好的生活。

Acesight VR



功能與規格	Acesight VR
螢幕	2340x1080 FHD 畫質
倍率	1x ~ 16x
操作	無線藍芽遙控器
鏡頭	4800M 畫素； 60fps
視野	65 °
視野搜尋	Yes
影像凍結	Yes
高對比色彩	4 種；特殊影像 3 種
進階功能 1	偏移顯示功能。適合視野缺損或隧道行視野人士使用
進階功能 2	影像搜尋功能
頭戴裝置重量	460 公克
電池	充電 1.5 小時；使用 2.5 小時

常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llaims.com.tw

新品上市

SNOW 12 文字辨識遠近擴視機



SNOW 12 是台灣目前市售的移動式擴視機當中螢幕尺寸最大的其中之一。提供 45°螢幕的輕鬆閱讀傾角。9x5 平方公分的超大觀看面積，可減少畫面挪動的次數或範圍，讓眼睛更加輕鬆。

SNOW 12 具獨立望遠鏡頭，可觀看距離 35 公尺以上的目標物，並可調節倍率達 40 倍。視同級中最優異的產品。

SNOW 12 採用 6 顆突起的大按鍵，使用人能輕易辨識及掌握操作的功能。搭配螢幕觸控的輔助，更能讓人感到

隨心所欲。

每臺 **SNOW 12** 皆配置專屬的鋁合金閱讀支架。結合支架的使用，更能發揮 **SNOW12** 的獨特性能。支架佔用面積約為 A4 大，但可折疊、重量輕、好攜帶，不太會造成使用者太多困擾。

SNOW12 具備文字辨識功能，辨識語文多達 24 種。若架設在支架上，**SNOW12** 更可辨識達 A4 全頁

面。辨識後的資料可單獨儲存做為後續之用。請您不要懷疑 **SNOW12** 的強大功能。若您想親眼見證，歡迎您跟我們連絡展示的時間。

功能與規格	Snow 12
螢幕	12" 單點觸控 LCD ； FHD 解析度
倍率	2.5x ~ 40x
閱讀支架	鋁合金材質，可折疊
模式	遠近模式，獨立鏡頭
文字辨識	Yes (中、英、西、俄等多達 24 國語言);面積範圍可達 A4 ；可儲存為.txt, RTF 格式
儲存容量	約可儲存 1000 張圖片或百萬個純文字朗讀文件。
語音	具 20 國語言，操作時同步語音提示。
高對比色彩	10 種
亮度/輔助燈/省電模式	畫面亮度可調整、輔助燈源可獨立開閉、省電模式、直/橫向閱讀導引線及畫面遮蔽。
輸出	HDMI 即時影像 / type-C 圖片資料
重量	960 公克
電池	充電 3 小時；使用 2.5 小時

5M Pexels
High Contrasts
Magnification



常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司
Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llaims.com.tw

新品上市

遠近型擴視機 GoVision PRO

GoVision PRO, 除了 720p 解析度，每秒 60fps 的 HD 畫質外，機身結構厚實，支臂架與關節部位皆可 180° 旋轉。並且搭載一套影像防震處理技術，效果相當優異。大大降低了畫面震動所造成的身心不適。

GoVision PRO, 比其他品牌機種更具有連結性。具備 USB 接孔，HDMI 可連結電腦。可播報文字檔(.txt、doc、pdf)、圖片檔(PNG、jpg)、影音檔(mp4)。

GoVisionPRO 原機備有 1300 萬畫素辨識鏡頭。

性能與規格	GV100 PRO
雙鏡頭	望遠、看近、自拍、拍照
影像	24" HD 高畫質影像。具有影像防震設計。具備影像儲存及暫停功能。影像自動翻正調整功能，無需顧慮左右方位。
放大倍率	1.7x~73x
亮度照明	五段及自動感應式。可依環境調整亮度。
對焦	全時自動對焦、焦距鎖定及方位搜尋十字座標
操作介面	線控遙控器及鏡頭端多功能按鍵。可處理倍率、對比色及輔助燈。
高對比色彩	6 種預設、4 種自定義色彩。自定義色彩有 50 多種可供選擇。
特殊功能	能朗讀文字檔，且可將文字檔做對比色及倍率的調整。亦可播放影音檔、圖片檔
OCR 辨識系	內建 1300 萬畫素鏡頭。可整頁 A3、
導引線 / 遮蔽	水平 / 垂直
收納	鏡頭可收納。專用拖式旅行箱(選購)
重量	8.5 公斤。

Magnifier - GoVision
OCR-Multi Player
Braille Product
HIMS

Blurry free image and Natural Color-1

- Designed to protect users' remaining vision with a comfortable, natural image. GoVision displays a blurry free image with vibrant, true-to-life coloring of magnified objects

Strong stand to reduce blurring of images

Strong, sturdy stand to reduce blurry images due to environmental interference. Ensures that vibrations caused by heavy footsteps, passing cars


* Compare with other devices

Magnification
The main benefit of that the GoVision magn

Magnification
The main benefit of that the Other product mag

Magnifier - GoVision
OCR-Multi Player
Braille Product
HIMS

Product Photos

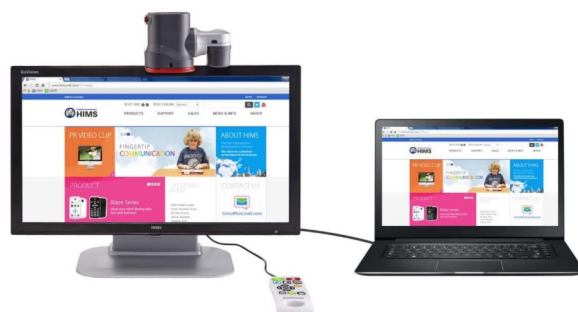

常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七
(捷運忠孝新生站二號出口)

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



LONG LEAVES

常業企業股份有限公司

新品上市

www.lladds.com.tw

無懈可擊的擴視機

LVI ML ZIP Premium 可攜式桌上型遠近擴視機

與 Ferrari California,

Volvo XC90, SONY 共

享 2015 年德國紅點設

計獎殊榮的 LVI ZIP

Premium 可攜式遠近

型擴視機。設計的主

軸將可攜型的便利、

桌上型的穩定、遠近型的效能，三者合一。完美且穩定的

畫質(HD 及 FHD)，多樣化的組合(電池、拖盤、LCD

[13 或 17 吋]任意搭配)；僅五顆防呆按鍵的簡約操作。相信無論任何年齡

層的人，都能輕易上手。



功能與規格	LVI MLZIP Premium
放大倍率	1.7x ~ 45x
色彩模式	650:1 的高反差對比；14 種反差色彩
鏡頭模式	HD(720p)或 Full HD(1080p) 60 fps 畫質， 可旋轉 270 °看近、望遠、自拍
對焦方式	全自動對焦、手動調焦、鎖定焦距
特殊功能	機身可折疊攜帶，含專用背袋
	LED 輔助燈源明暗調節
	水平/垂直閱讀導引線及畫面遮蔽
	休眠或自動關機設定
	5~9hr 高效能電池(選配)
影像搜尋	Yes
重量	13" : 3.7Kg ; 17" : 4.3Kg
尺寸	13" :33x45x51 cm ; 17" :44x47x56 cm



常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七
(捷運忠孝新生站二號出口)

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llaid.com.tw

新品上市

可攜式擴視機 MANO 6

Mano 6 擴視機

MANO 6 配備了高分辨率觸摸顯示屏以及四個觸覺按鈕，可實現輕鬆舒適的操作。此外，可以調節放大倍率，並且可以用手指通過縮放手勢滾動圖像。通過顯示屏右側和左側的觸覺按鈕，可以調節不同的對比度模式，放大倍率並可以拍攝照片。

高度僅為 9 厘米的 MANO 6 可以很好地握在手中。由於採用了寬屏格式，因此閱讀流程不會中斷，因為即使在高放大倍數下，您也可以同時查看多個字母。

折疊支架時，MANO 6 會自動打開。您現在可以將放大鏡放在閱讀模板的頂部，並開始按照人體工程學進行閱讀角度。

另外，您也可以使用手柄，例如 仔細看看價格標籤購物時。一個軟包可以保護 MANO 6 不受損壞。



MANO 6

螢幕	5.5" 多點觸控式螢幕，1920x1080 畫素
放大倍率	2x~35x，無段式調整
對焦	全自動(可關閉)
色彩	全彩+16 種高對比色
外觀	旋式握把；收納時可立起機身
輔助燈	可調整輔助燈亮度及熄滅
對比度/亮度	Yes
影像	導引線&遮蔽、凍結、儲存
圖像	可觸控滑移、播放。內建 2GB 容量或插卡
其他	選單、操作提示音，約 3 小時使用時間
尺碼	16x 9.1x 2.1 cm
重量	274 公克

常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號 9 樓之 7

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司
Long Leaves Enterprise CO., LTD.

電話：(02)2397-0197

地址：台北市忠孝東路二段 130 號 9 樓之 7


www.llaid.com.tw

新品上市

可攜式擴視機 LUNA 6

Zoomax Luna 6 是一款卓越的產品，旨在增強每個人的視覺體驗。**Luna 6** 的內建手柄可以讓視障人士更輕鬆地觀察近距離和中距離的物體。對於家庭使用而言，**Luna 6** 對於閱讀產品手冊、檢查電視遙控器以及確認廚房電器上的操作按鈕等任務非常有用。

除了在家中實用之外，**Zomax Luna 6** 因其緊湊輕巧的設計而成為戶外使用的理想選擇。它是各種移動活動的有用伴侶，例如檢查餐廳的菜單、在雜貨店購物時閱讀標籤以及查看產品資訊或價格標籤。它為視力障礙人士帶來了極大的便利和可及性。

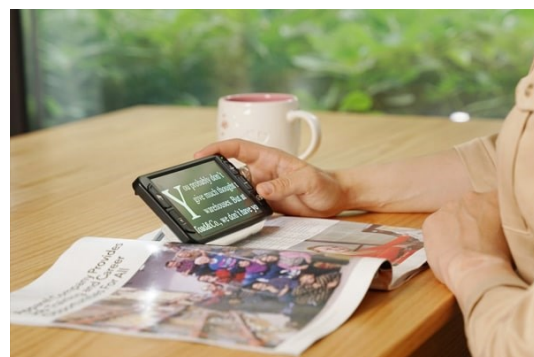

功能與規格	Luna 6
螢幕	HD 高畫質 5.5 吋 TFT-LCD
握把	3 段式人體工學握把，可調整超過 200°
倍率	放大倍率 2.5-19X
閱讀支架	附專屬閱讀腳架並提供閱讀倍率：2X ~8X。
望遠&自拍	具備望遠及看近兩種焦距。
對焦	具全自動對焦及手動對焦。
儲存影像	可畫面凍結及儲存，無需插記憶卡。
高對比色彩模式	10 種高對比色模式。 10 段對比度調整。
亮度/輔助燈/省電模式	10 段式亮度調節、LED 輔助燈啟閉、省電模式啟閉。
時間顯示	時間顯示功能。
重量	300 公克。

常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司
Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llaid.com.tw

新品上市

輕盈方便 功能完全

Topolino Smart 2K 高解析遠近擴視機



多樣化的鏡頭角度，不但提升了操作的靈活度，更能適應任何一種擺放空間。更添其便利性。

Topolino Smart 2K 功能與規格

- ◎鏡頭解析度最高可達 2048x1280p。
- ◎放大倍率 1.25X~ 100X(24"螢幕)。
- ◎具彩色/黑白/正負片共五種人工色彩效果。
- ◎可切換自動/鎖定對焦模式。
- ◎操控介面採大按鍵設計及 LED 高亮度照明燈。
- ◎具 HDMI 以及單一 USB 3.0 輸出並可搭配各款螢幕及電腦使用。
- ◎具對比、亮度、清晰度調節功能。
- ◎具畫素調節功能，可配合各種長寬比例的螢幕使用。
- ◎專屬電腦安裝軟體，可支援 Windows 7 以上、OS 雙系統。
- ◎一機可望遠、閱讀、鏡像三功能使用。
- ◎內建電池，可連續使用 3 小時，紓解無插頭之窘境。
- ◎鏡頭水平轉動角度達 270°。
- ◎具有閱讀導引線及遮蔽功能。
- ◎重量：約 2.3 公斤，一體成型設計可摺疊收納方便攜帶。

常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七
(捷運忠孝新生站二號出口)

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司
Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llaid.com.tw

新品上市

德國 Reinecker Topolino Flex 2K 超高解析遠近擴視機

獨特的構造，造就了超高的靈活度，能適應任何一種擺放方式。更添其便利性。



Topolino Flex 2K 功能與規格

色彩模式	具彩色及 8 種半人工色彩，可搭配出 50 多種人工對比色彩。
鏡頭調整	鏡頭水平及垂直轉動角度達 270°；搭配支架旋轉可調整角度達 360°。可投影出室內任何一處的影像或 A3 以上尺寸的書籍。
鏡頭支架調整	4 個活動關節，每個關節可旋轉 360°，免拆解可即時收折及置放。僅需一節支架，即可投影室內任何一處的影像或 A3 以上尺寸的書籍。
操作與控制	操控介面採對稱式排列大按鍵無線遙控器，按鍵數僅 12 顆，按鍵功能多為往復式邏輯設計，使用者無須再以視力確認按鍵。
影像搜尋	Yes。影像中心收放倍率的十字形搜尋圖示。
影像 1	影像可 0°、90°、180°、270° 翻轉及鏡像影像，達成影像上下左右翻轉效果。
影像 2	100 段的對比度調節；高對比色/原色字體進階增強功能(無須借助外在光源)；RGB 三原色飽和度調節功能；鏡頭快門選擇；影像噪點修飾功能。
鏡頭	鏡頭解析度最高可達 2048x1280p (2K) 畫質。
放大倍率	放大倍率 0.9X~120X 以上(24" 螢幕)。
進階功能	支援 Windows 10 相機 app，可擴充錄影及儲存畫面等功能，USB 一接即用，無須安裝驅動程式。
對焦模式	三種鏡頭對焦模式或鎖定對焦功能。較他牌有更多種對焦模式選擇。
導引線&遮蔽	具有閱讀導引線及遮蔽功能。可設定導引線的起始位置；三種螢幕遮蔽透明度、覆蓋程度、寬度可選擇。
連接	具 HDMI 以及單一 USB 3.0 輸出，可支援各款螢幕及電腦使用。
影像畫素	具畫素調節功能，可配合各種長寬比例的螢幕使用。
支援軟體	可支援 Zoomtext/SpuerNova 等多家螢幕放大軟體同時使用。
重量	重量：約 4.5 公斤。

常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七
(捷運忠孝新生站二號出口)

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



LONG LEAVES

常業企業股份有限公司


www.llaid.com.tw

新品上市

VEO 無懈可擊的德製桌上型擴視機

VEO 視覺概念是一種模組化概念，可滿足用戶的個性化需求。它提供了最高的閱讀和操作舒適度。VEO 是德國製造，融合了創新技術和現代設計。全高清 Vario 鏡頭可將文字、圖片或物體放大 1 倍至 100 倍以上，並保證高對比度和無閃爍的圖片。獨特的 NELE 技術（自然進化光體驗）最大限度地減少了反射和陰影。這提供了許多優勢——尤其是在手寫或查看三維物體或光面雜誌時。

VEO 可提供 20" 及 24" 一體成型的 FHD LED 平面螢幕或單獨連接的 LED 螢幕。三按鈕遙控器可嵌入螢幕或機身，保證了 VEO 的易於使用和舒適的操作。

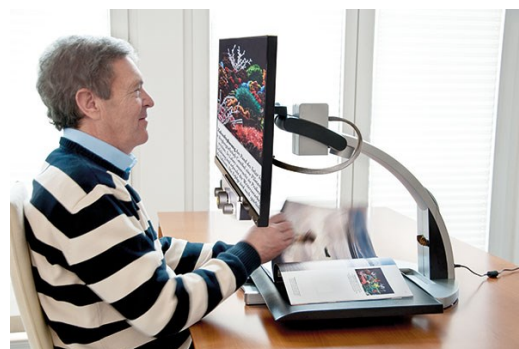

功能與規格	VEO
放大倍率	1x ~ 100x
色彩模式	50 種高反差色彩，5 種常用預設反差色彩
鏡頭	Full HD 1080P，具超廣角及數位變焦
影像 1	解析度 1920x1080, NELE (低反光技術)
影像 2	亮度、一般對比、超對比、飽和度可調
螢幕調整	20" or 24" 平面 FHD LCD。高度、俯仰角可調整；水平/垂直旋轉；左右側面偏轉
	LED 輔助燈源明暗調節
	水平/垂直閱讀導引線及畫面遮蔽
操作	嵌入式三鈕遙控器
對焦方式	全自動對焦、鎖定焦距
重量	12.1Kg

常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七
(捷運忠孝新生站二號出口)

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



LONG LEAVES

常業企業股份有限公司

新品上市


www.llajds.com.tw

可攜式擴視機 MEZZO 2K 遠近擴視機

Mezzo 2K 極具設計巧思，將過去體積龐大且笨重的桌上型，僅保留外觀樣式。機身予以輕量化，可折式支架及螢幕，讓視障朋友在搬移時比以往更為方便。讓產品的使用效率更為提升。

Mezzo 2K 採用最新的 2K 畫質鏡頭，並搭配 LVHD 無聲噪影像技術，畫質更為清晰，色彩對比更加分明，更為視障朋友分辨出物體影像的差異；另外，獨特的鏡頭設計，使的該鏡頭可水平旋轉 270 度；垂直 180 度，望遠能力幾乎無死角，超越目前市場上同類型產品的靈活度。

Mezzo 2K 安裝及操作都很簡易，即使是第一次使用的人也能輕易上手。僅三顆主要旋鈕即可提供倍率調整、對焦、亮度、導引線等功能控制，無論是第一次接觸擴視機的朋友或老年人都適合操作。

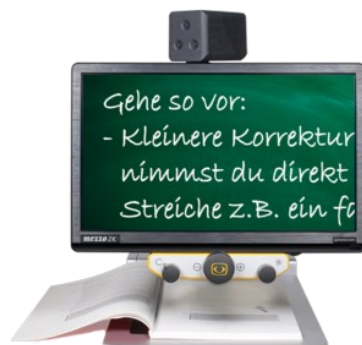

功能與規格	Mezzo 2K
放大倍率	1.9x ~ 100x 以上
色彩模式	5 種反差色彩
影像模式	Full HD 畫質
特殊功能	機身可折疊攜帶
	LED 輔助燈源明暗調節
	水平/垂直閱讀導引線及畫面遮蔽
	XY 活動閱讀托盤(選配)
	5~9hr 高效能電池
對焦方式	全自動對焦、鎖定焦距
重量	5.2Kg



常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七
(捷運忠孝新生站二號出口)

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.lladds.com.tw

輕盈方便 功能完全

LVI Magnlink S 高解析遠近擴視機(B款)



MLS NEW 榮獲 2013 年德國紅點  設計大獎首獎。

reddot award 2015
winner

富摺疊性的多關節設計，不但提升了操作的靈活度及穩定性並且更佳的便於收納。

LVI MLS 功能與規格

倍率縮放範圍:2.5X ~ 50X，1280x720p 解析度。

三種控制介面，鍵盤、本體、滑鼠。

全時自動對焦/焦距鎖定功能。

無段式倍率及對比度調節。

具有彩色及正 / 負片/灰階,共 14 種半人工色彩。

可望遠、攝影、閱讀、鏡像四功能合一。

One Touch 擷取影像及攝錄影功能。在第一時間完成儲存；另有 One Touch 影像播放快捷模式。

具垂直 / 水平閱讀導引線以及畫面遮蔽功能。

影像可做鏡像左右翻轉以及 180 度畫面旋轉。

LED 輔助燈源可明暗調節及啟閉。

機身可鉤折，便於攜帶/收納。附專用側背式背包。

影像可輸出於 Window 或 MAC 系統電腦，並與 ZoomText 軟體同時搭配使用。

具擴視機及電腦分割畫面。

重量約 1.7KG。

常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七
(捷運忠孝新生站二號出口)

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司
Long Leaves Enterprise CO.,LTD.

電話：(02)2397-0197

地址：台北市忠孝東路二段 130 號 9 樓之 7

www.llaid.com.tw

新品上市

ivt 7 Touch 可攜式擴視機



功能與規格	VD700 Touch
螢幕	7 吋 LCD, 1024*600 畫素
鏡頭	雙鏡頭；遠近鏡頭各自獨立
鏡頭畫質	近：800 萬畫素 遠：800 萬畫素
放大倍率	2x~32x
高對比色彩模式	26 種高對比模式。
亮度/輔助燈/省電模式/	5 段亮度調節、LED 輔助燈啟閉、省電模式、照片備忘錄音、模式記憶。
儲存影像	可畫面定格操作及儲存 100 張畫面影像，或記憶卡擴充支援；USB 連接電腦轉存資料。
影像瀏覽	支援；畫面可滑動畫面瀏覽。
操作介面	螢幕觸控&超大按鍵
閱讀導引線	導引線與閱讀框
影像外接	Yes。HDMI 訊號 & AV 訊號。
重量	395 公克。4 小時待機電力。

多功能的可攜式擴視機。可適應任何族群的使用者。

- ☆高畫質影像：銀髮族/低視能者
- ☆2~32 倍放大：低視能者
- ☆26 種高對比：低視能者
- ☆人體工學螢幕：菜籃族/銀髮族
- ☆閱讀腳架：銀髮族/上班族/學生

常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七
(捷運忠孝新生站二號出口)

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llaid.com.tw

新品上市

可攜式擴視機 LUNA 8



操作教學？沒必要！使用 Luna 8 比使用計算器更簡單，1 分鐘即可掌握一切。所有基本功能，例如 放大/縮小、高對比度顯示和圖像凍結，可通過按下大尺寸按鈕進行訪問。所有設置都在菜單中顯示圖標，您只需按一下主頁按鈕即可進入。沒問題！

將 Luna 8 帶到您想去的任何地方：在家、辦公室或學校。Luna 8 雖然方便閱讀，但對於戶外生活來說也非常實用。重量輕，便於攜帶；它具有遠距離觀看功能，使您可以看到餐廳的菜單板或會議室中投影的幻燈片。Luna 8 電池續航時間長達 8 小時，是您連續使用的完美便攜式放大鏡。

Luna 8 適合每個人的風格。纖薄、啞光、帶紋理的飾面，黑色按鈕上帶有白色，就像大多數人會喜歡的酷炫科技產品一樣。這款電子視頻放大鏡不是光學放大鏡，而是讓您看起來更加明亮。它時尚而自信，同時提升您的視覺生活。

型號	LUNA 8
螢幕	8" LCD，1280x800 畫素
放大倍率	2.5x~19x，無段式調整
對焦	1300 萬畫素，全自動
色彩	全彩+ 10 種高對比色
特殊操作	鏡頭遠近模式
對比度/亮度	Yes
影像	導引線&遮蔽、凍結、儲存
儲存	可儲存 500 張圖片，瀏覽時可調整倍率及色彩
其他	HDMI 影像外接輸出
尺碼	218x 143x 1.1 mm
重量	500 公克



常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號 9 樓之 7

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llajds.com.tw

新品上市

可攜式擴視機 *MANO XL*



全新的光電放大鏡 MANO XL 提供 7 英寸顯示屏，可連續顯示放大倍數高達 28 倍，並且設計緊湊，重量輕。

由於具有自動對焦和高分辨率高清攝像機，因此所有文本和圖片都可以以清晰的質量顯示並增強對比度。

使用創新的距離查看模式，您還可以查看周圍的物體，像路牌。拍攝快照，放大並選擇您喜歡的對比度增強功能，可根據您的個人需求舒適地閱讀。

通過集成的 HDMI 端口將 MANO XL 與外部監視器或電視連接，並以更高的放大倍率查看您的照片或文檔。

型號	MANO XL
螢幕	7" IPS 面板，1280x720 畫素
放大倍率	2.4x~28x，無段式調整
對焦	全自動(可關閉)
色彩	全彩+18 種高對比色
特殊操作	影像滑移搖桿；遠近模式鏡頭旋轉
輔助燈	可調整輔助燈亮度及熄滅
對比度/亮度	Yes
影像	導引線&遮蔽、凍結、儲存
圖像	可滑移、播放
其他	選單、操作提示音，約 3 小時使用時間
尺碼	18.8x 13.8x 2.1 cm
重量	480 公克



常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號 9 樓之 7

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852




常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llaid.com.tw

新品上市

移動式擴視機 *MANO XXL*

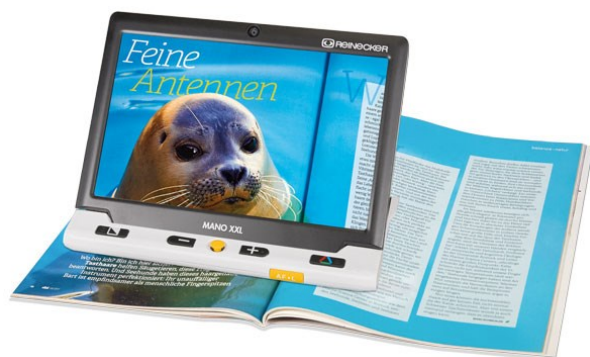


進階的電子放大鏡 MANO XXL 提供 10 英寸顯示螢幕，可連續顯示放大倍數高達 18 倍，並且設計緊湊，重量輕。

由於具有自動對焦和高畫質攝像頭，因此所有文字和圖片都可以以清晰的顯示並增強對比度。

使用創新的遠距查看模式，您還可以查看周圍的物體，像路牌。拍攝快照，放大並選擇您喜歡的對比度增強功能，可根據您的個人需求，選購舒適又便利閱讀的支架。

通過 HDMI 接口將 MANO XXL 與外部監視器或電視連接，並以更高的放大倍率查看您的照片或文檔。

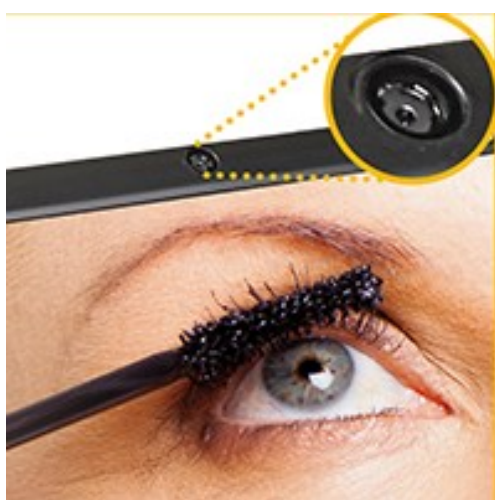

型號	MANO XXL
螢幕	10" IPS 面板，1280x800 畫素
放大倍率	2x~32x，無段式調整
對焦	全自動(可關閉)
色彩	全彩+18 種高對比色；自選偏好色彩
特殊操作	影像滑移搖桿；遠近模式鏡頭旋轉
輔助燈	可調整輔助燈亮度及熄滅
對比度/亮度	Yes，5 level
影像	導引線&遮蔽、凍結、儲存
圖像	可滑移、播放
其他	選單、操作提示音，約 3 小時使用時間
尺碼	24.5x 20x 2.2 cm
重量	680 公克

常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號 9 樓之 7

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司
Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llaid.com.tw

新品上市

多功能擴視機 *MANO EDU*



MANO EDU 配備可折疊支架並配備兩個鏡頭（近距離和遠距離）。兩款攝像頭均提供超高清 4K 分辨率，並且由分屏功能可以在 12.5" 觸控螢幕上同時顯示。顯示屏的視角可無段式調整，梯形影像校正補償失真。

配備 OCR 朗讀功能，您只需按一下按鈕即可擷取整個 A4 頁面，然後朗讀給您聽。捕獲文檔中的多頁以及將外部圖像和文本文件從 PC 複製到設備的能力，使 MANO EDU 成為在所有情況下的多功能助手。

可選購的 MultiView 第二螢幕不需要單獨的電源，可以安裝在主顯示屏上方，為您分享望遠鏡頭所提供的影像。



型號	MANO EDU
螢幕 1	12.5" 觸控式螢幕，1920x1080 畫素
螢幕 2(選購)	12.5" 可拆式無外接電源螢幕
螢幕	支援遠近影像同步/分割或互換或聚焦顯示
倍率	1x~60x，無段式調整
鏡頭	ultra 4K 雙鏡頭；解析度 3840x2160
對焦	全自動(可關閉)
色彩	全彩+16 種高對比色；自選偏好色彩
支援格式	圖：JPG,PNG,BMP；文：txt, PDF
影像儲存	Yes。2G
輔助燈	LED 光源，可調整光源模式
導引線/遮屏	Yes；垂直/水平
螢幕亮度&對比	Yes。可調整
文字辨識	中、英等 16 國語言；範圍 A4 整頁
硬體	耳機孔；喇叭；HDMI 輸出/入孔；SD 卡；USB
電力	充：約 3 小時；使用：4~5 小時
尺碼	24.5x 20x 2.2 cm
總重量	2.4Kg



常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號 9 樓之 7

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llaims.com.tw

新品上市

輕便型語音擴視機 *MANO EDU XL*

MANO EDU XL 是一款配備可折疊支架的電池供電視訊擴大機。除了主相機之外，它還有一個可以全方位旋轉的距離相機。這兩款攝影機均以其超高清 4K 解析度令人印象深刻，並且由於整合的分割畫面功能，還可以在觸控顯示器上同時觀看。MANO EDU 配備 15.6 吋顯示器。

配備朗讀功能，您只需按一下按鈕即可捕獲整個頁面並朗讀給您聽。MANO EDU XL 甚至可以將 A3 格式的頁面顯示出來，而無需來回移動閱讀材料。能夠在一個文件中捕獲多個頁面，以及將外部圖像和文字檔案複製到設備的選項，使這款便攜式視訊放大器成為所有情況下的多功能伴侶。

朗讀功能

可選的第二個顯示器不需要單獨的電源。它可以安裝在主顯示器上方，為您提供最大的便利。

遠距離攝影機可以向各個方向旋轉。如果攝影機背向設備，則可以將其用作室內攝影機。如果您將相機轉向您，它會自動切換到鏡像功能。在水平方向上，它可以用作您筆記的第二個文檔相機。還可以查看 SD 卡或 USB 中的圖像、文字和 PDF 並將其永久保存在裝置上。



功能與規格	MANO EDU XL
螢幕	15.6" Touch LCD ; 1920x1080
倍率	1.4x ~ 56x
鏡頭	遠近雙鏡頭。HD 4K 畫素，3840x2160
操作	觸控式螢幕及按鍵操作。
對焦	全自動對焦。
文字識別	A3 size 頁面：含中英文等多國語文
對比色彩模式	16 種喜好高對比色及全彩
導引線/遮蔽	可調整的垂直 / 水平閱讀導引線與畫面遮蔽
特殊功能 1	可分割畫面
特殊功能 2	可掃描多頁文件
重量	4.75Kg
尺寸	45(W)x32.5(D)x32.5(H) cm

常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852

點字相關輔具



常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO.,LTD.

www.llaid.com.tw

環保點字溝通學習板 *Versa Slate*

寫點字不需要用紙

4 行，每行 20 方，共 80 方。

附專屬點筆。

有點字方塗銷按鈕。

尺寸：20.2 (L) X 8 (W) X 1.5 (H) cm。

重量：150g。

內藏有磁石，與專用皮套搭配使用。(選購)



常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七
(捷運忠孝新生站二號出口)

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llaims.com.tw

新品上市

Braille eMotion 劃時代的點字顯示器

清晰、清晰的點字顯示模組

使用我們先進的盲文顯示幕，體驗流暢且回應迅速的閱讀體驗，該顯示器具有 40 個清晰的盲文單元格。

多面性

通過 1 個 USB 和 5 個藍牙連接同時無縫連接到多個設備，包括智慧手機、平板電腦和計算機，以提高可存取性和效率。

跨多個平台和設備

連接到多個平臺和設備上的多個螢幕閱讀器，包括適用於 Windows 的 JAWS、NVDA 和 Microsoft Narrator、適用於 Mac 和 iOS 的 VoiceOver 以及適用於 Android 的 TalkBack/BrailleBack；增強輔助功能並提高工作效率。

直觀的導航

通過我們使用者友好的介面和符合人體工程學的設計，輕鬆瀏覽文檔、網站和應用程式。

長效電池

我們的電池續航時間長達 20 小時，可確保不間斷地訪問資訊，從而延長使用時間。

小巧便攜

我們的盲文 eMotion 專為移動訪問而設計，輕巧緊湊，無論是在辦公桌前還是在旅途中，它都是完美的伴侶。

便捷的文字轉語音（TTS）功能

享受 TTS 的額外便利，允許 eMotion 以自然的聲音朗讀數位文件內容。

獨立記事本和應用程式

通過內部獨立應用程式（包括記事本、DAISY 和文檔閱讀器、媒體播放機、計算機、鬧鐘、秒錶、睡眠定時器和錄音機）提高工作效率。

有用的 Wi-Fi 連接

通過內置 Wi-Fi 升級盲文 eMotion 是一件輕而易舉的事，並為未來的增強提供了額外的功能和多功能性。



規格	Braille eMotion
點字方數量	四十點字方，可設定六或八點顯示。中文點字介面。獨立可抽換式顯示字方。
新增功能 1	Autoscroll 自動瀏覽文件；單手控制；點字細胞診斷測試；點字速編模式
新增功能 2	支援國字轉譯.txt、doc、docx、BRF、PDF(text)、Daisy 檔案為點字
新增功能 3	內建 TTS 朗讀程式，可朗讀.txt、doc、docx、BRF、PDF(text)文字
新增功能 4	支援多媒體撥放。ac3, asf, asx, m3u, mp2, mp3, MP 4, mpa, mpg, ogg, pls, wav, wax, wma, flac, midi wmv, mov.格式。
新增功能 5	高音質錄音
傳輸介面	雙傳輸介面，1 組 Type-C USB 及 5 組藍芽
快閃記憶體	支援 micro SD 記憶卡；內建 64G 容量，RAM 4G。
體積 / 重量 / 時間	體積：320x90x21mm，重量：740 公克，使用 20 小時。附專用保護套。



常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llaid.com.tw

新品上市

全台唯一有中文操作介面的進口點字顯示器

QBraille XL 是新一代的點字觸摸顯示器。除了承繼 **Braille Edge** 多功能的優良傳統外，功能又更為增強。**EX**：鍵盤全面更新為 **QWERTY** 介面。**QWERTY** 介面即是相仿於電腦鍵盤的操作介面。完整保留了 **F1~F12**、**Page up/down** 等鍵的配置，讓用戶的操作習性能與電腦鍵盤相結合。甚至也可取代原有鍵盤的功能。



QBraille XL 將 mini-USB 升等為 **Type-C**。用戶在連接裝置時不必區分正反面，不但提升了效能，而且是對於視障朋友相當友善的設計。另外，6 組藍芽頻道，讓您可同時操控電腦、手機、平板等裝置，更添便利性。**QBraille XL** 依舊保有行事曆、計算機、時鐘、碼表、計時器等功能；內建的記事本功能不需另外連接電腦，摸讀時可同時編輯如:doc, docx, PDF, Daisy 等格式的點字文件，剪下貼上等編輯指令近似微軟的編輯指令。此外，鍵盤亦提供 Apple 按鍵佈局，在連結 Apple 裝置時亦能提供控制或編輯的功能。外觀上比 **Braille Edge** 更薄，由多種材質搭配而成的機身，不但維護輕鬆，而且更顯尊貴質感。



規格	QBraille XL
點字方	四十點字方，可設定六或八點顯示。中文點字介面。獨立可抽換式顯示字方。
平台軟體	適用多種平台介面，如：NVDA(Windows)、JAWS、VoiceOver(ios)、BrailleBack(Android)系統等。具中英文即時顯示。
功能按鍵	柏金斯 9 按鍵與 QWERTY 按鍵介面、雙 Ctrl / Alt、Esc、Tab、Shift、Window、Inser、PageUp、PageDown、Home、End 等按鍵，可作為中英文繕打及操作電腦之用
傳輸介面	雙傳輸介面，1 組 Type-C USB 及 6 組藍芽
點字即時顯示	可顯示電腦或智慧型手機、平板電腦等資料
內建功能	內建記事本、行事曆、鬧鐘、計算機、碼表、計時器等多種日常功能
特殊功能	Autoscroll 自動瀏覽文件；單手控制；點字細胞診斷測試；點字速編模式
快閃記憶體	具備 SDHC 記憶卡插槽，適合 32G 容量。
體積 / 重量 / 時間	體積：310x119x18mm，重量：825 公克，使用 20 小時。支援記憶卡，附專用保護套。
文件編輯/讀取	可編輯(剪下、貼上、複製、替代、尋找)純點字檔，可讀取 PDF(文字)、DOC、DOCX、BRF、TXT、Daisy 的文字檔案等格式的點字文件。
附贈軟體	免費使用 NVDA，無需註冊或使用數位鎖。



常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO.,LTD.

www.lladds.com.tw

經濟又實惠的點字列表機 *ViewPlus Columbia 2*

- ◎ 全新型態打印撞針模組，點字觸感更為明顯，更為持久。列印速度提升 20%
- 輕量化的 TIGER 列表機
- ◎ 有 5 種標準點字間距選擇
- 擁有安靜、易操作、高品質的特點
- ◎ 連續式進紙，可單/雙面列印。從影印紙到膠紙；可列印點字標籤
- ◎ 內含專用圖形編輯軟體 Tiger Software Suite (TSS)並配合原圖形之明暗打印
出具層次感的點字圖形
- ◎ 可調整列印力道 輕、中、重等級
- ◎ 支援 USB 連結



功能與規格	<i>VP Columbia 2</i>
列印速度	120 字元 / 秒
紙寬範圍	7 ~ 12.5 吋
TSS	附 TSS 專用繪圖軟體
解析度	100DPI。3D 圖形能力，7 種深淺點字
進紙方式	連續式進紙，可雙面列印
機器大小	55.7 *27.5*158 公分
機器重量	9 公斤
外掛程式	微軟 Word 及 Excel 點字轉譯程式
噪音	75db
支援介面	USB, network, Windows 10 / 8 / 7 / XP ;Mac OS10.9

常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七
(捷運忠孝新生站二號出口)

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llaims.com.tw

3D 圖形點字 樣樣可印

ViewPlus Rogue

- ◎全新型態打印撞針模組，點字觸感更為明顯，更為持久。列印速度提升 20%
- ◎輕量化的 TIGER 列表機
- ◎有 5 種標準點字間距選擇
- ◎擁有安靜、易操作、高品質的特點
- ◎連續或單張進紙，單面列印。從影印紙到膠紙；可列印點字標籤
- ◎內含專用圖形編輯軟體 Tiger Software Suite (TSS)並配合原圖形之明暗打印出具層次感的點字圖形
- ◎可調整列印力道 輕、中、重等級
- ◎支援 USB (wi-fi & bluetooth 選配)連結

功能與規格	VP Rogue
列印速度	120 字元 / 秒
紙寬範圍	7 ~ 12 吋
TSS	附 TSS 專用繪圖軟體
解析度	20~100DPI。3D 圖形能力，依色彩 7 種深淺點字
進紙方式	連續/單頁進紙，單面列印
機器大小	55.7 *27.5*158 公分
機器重量	9 公斤
外掛程式	微軟 Word 及 Excel 點字轉譯程式
噪音	75db
支援介面	USB, network, Windows 10 / 8 / 7 / XP ;Mac OS10.9



常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七
(捷運忠孝新生站二號出口)

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司
Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.lladds.com.tw

圖形/點字/雙視文字 樣樣可印 ViewPlus Elite 點字列表機

- ◎Elite 是 Viewplus 機種中，列印速度最快的列表機。
- ◎列印的點字具有層次豐富、密集、高品質等特點
- ◎適用續式報表點字紙。並可雙面列印。
- ◎內含專用圖形編輯軟體 Tiger Software Suite (TSS)，可編輯出專屬的.prn 檔。
- ◎另加裝墨水匣 InkConnect(選配)，可製作出雙視(點字、文字)樣品。
- ◎支援微軟、MAC、Linux 等系統。
- ◎搭配 Tiger Box(選配)更可支援網路、wi-fi、MAC、安卓等系統的列印。



功能與規格	VP Elite
列印速度	200 字元 / 秒
紙寬範圍	4 ~ 12 吋
雙面列印	YES
解析度	3 種點字力道選擇，7 種點字深淺
進紙方式	連續式進紙
機器大小	56.9 X35.1 X 22.4 公分
機器重量	27.2 公斤
外掛程式	TSS / Tiger Designer
支援系統	Windows 7 以上；Linux； MAC



常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七
(捷運忠孝新生站二號出口)

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



LONG LEAVES

常業企業股份有限公司

www.lladds.com.tw

柏金斯點字機 (標準型)



歷史悠久的美國柏金斯點字機，是世界上款式最齊全的品牌。無論是最為普級的標準型；初學者使用的大點型；特殊的電動型及單手型；以及最新式輕量型。

柏金斯點字機。可靠、耐用。是國內外盲校採用最普及的機種。本公司為全台唯一的廠家，專聘專業

維修技師，負責柏金斯點字機所有款式的售後服務。讓用戶在器材的使用上獲得最週全的保障。

功能與規格	標準型
按鍵	具 8 點按鍵，含空白、倒退、換行鍵
紙張	可使用至 <u>A4 大小紙張</u> 並 <u>調整左右邊界</u>
字元數	42 方 / 行； 25 行/頁
定紙裝置	具 <u>定位，送紙功能</u> 打完紙張不會掉落。警示鈴聲
材質	鐵金屬，機械式結構
重量	4.7kg



常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七
(捷運忠孝新生站二號出口)

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



LONG LEAVES

常業企業股份有限公司

www.llaims.com.tw

EUROTYPE 德製點字機



近 40 年來，Blista Brailletec 一直致力於為盲人和視障人士開發、製造和銷售機器和輔助設備。除了專業的印刷設備，我們還提供廣泛的盲文機器、耗材、配件和服務選擇。作為德國知名製造商的一般進口商，我們擁有全系列的 INDEX 打印機。我們確信您會非常喜歡您的新 Eurotype。

Eurotype 是一個現代、安靜的機械盲文作家。由於其外殼一體式手柄，它易於攜帶。機器上提供的紙張通道系統可以讓您在單張紙 DIN A4 和 DIN A3 以及折疊紙上書寫。



功能與規格	標準型
按鍵	6 點按鍵、空白鍵、倒退鍵、換行鍵、消音鍵及越界鍵。附全機防水保護套。
紙張	可接受最大紙張寬度 300mm；紙張長度無限制。相容 A4 / A3 紙張。
字元數	每行最高可打 44 方點字。
定紙裝置	出紙處有一閱讀平台。機身裝置橡膠握把。
材質	ABS 塑鋼外殼。左右進出紙飛輪。左右邊界可調整。兩行距可選擇。行尾鈴聲警示。
尺寸重量	440x295x110 mm(長 x 寬 x 高) 4.6kg



常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七
(捷運忠孝新生站二號出口)

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO., LTD.


電話：(02)2397-0197

地址：台北市忠孝東路二段 130 號 9 樓之 7

www.llaid.com.tw

ZY-Fuse 熱印立體圖形機/熱印紙/麥克筆

採用特殊材質的 swell 紙，印上碳粉或特殊墨水的圖案，透過 ZY-Fuse 的熱感應，這些圖案將立即產生特殊變化，浮凸於紙張上。可讓視障朋友獲得 2.5D 的觸覺感受與訓練。

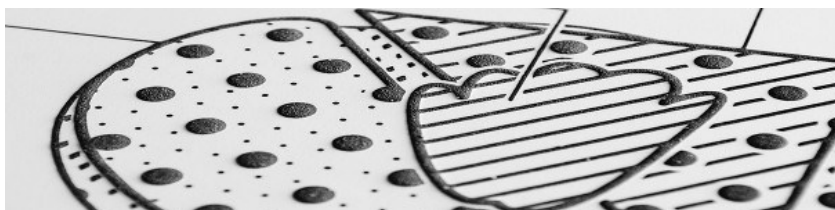

品項	規格
ZY-Fuse	可自動進紙及停止。
	具可調整溫度的旋鈕
	複印機頂端蓋上具有 3 個超大冷卻風扇，加強散熱。
	製作過程約 7 秒。
	有過熱保護及卡紙斷電保護。
	卡紙斷電後，風扇會繼續吹風冷卻紙張。
	可製作出華麗且輪廓分明的浮出曲線，標誌、點字、標籤、地圖、圖表…等等。
	尺寸: 15cm H *11cm D*50cm W。 重量: 7Kg。
	英國製。
熱印紙	A4, A3, B4 等尺寸
畫筆	黑色

常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七

電話: (02)-2397-0197


傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llaid.com.tw

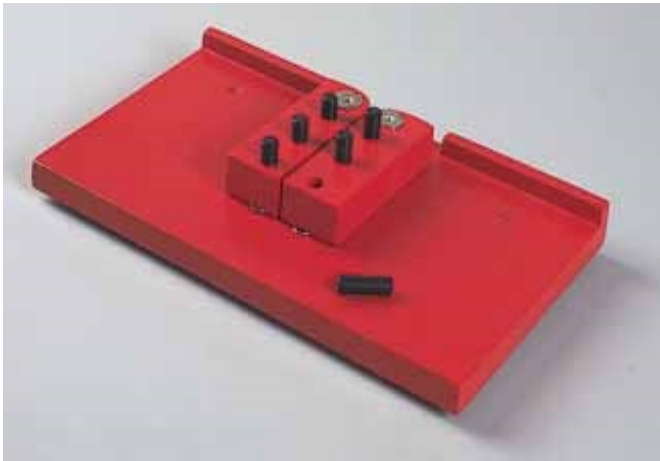


點字學習版

- (1) 兩長方形木塊頂端固定於一29x16.5 公分之木製盤底中間,每個長方形木塊有三個孔,內可放置小圓柱狀之釘子,將之垂直的置入孔內。
- (2) 當兩長方形木塊分開水平的放置,可幫助學習點字機上各點分佈之位置;當兩長方形木塊合併,即成為一方點字,可幫助熟識每個點字之基本架構。

觸摸點字學習版

- (1) 為初學點字者設計之學習版,以塑膠製小釘子所組成。
- (2) 學習版體積: 19.6x4.4x2.5cm,是以黑色厚板塑膠及白色釘狀物組合而成。
- (3) 學習板上共有十方點字,從左至右排列,將釘子壓下設定點字。正面可學習正確之點字,背面可學習點字板所點出之點字。

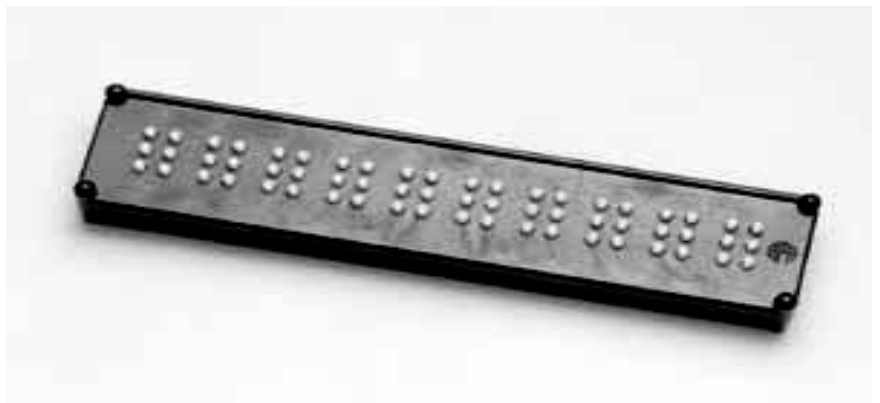

常業企業股份有限公司

公司地址:

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七
(捷運忠孝新生站二號出口)

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852

光學輔具



常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO.,LTD.

電話：(02)23917-0197

地址：台北市忠孝東路二段 130 號 9 樓之 7

www.llaid.com.tw

美國 NoIR 包覆式濾光眼鏡 (症狀建議列表)



Night Blindness 夜盲	
建議款式	50, 65

Diabetic Retinopathy 糖尿病視膜病變	減少眩光、增強對比
建議款式	01 ,02, 11

Cataract 白內障	視力模糊、防止眩光及增強亮覺		
建議款式 術前：	11,12,61	建議款式 術後	01 ,02

Retinis Pigmentosa 視網膜色素變性	防眩光、增強對比、增強光源		
建議款式	01 ,07 ,08		

Glaucoma 青光眼	防止眩光及光源舒適		
建議款式	12 ,01 ,02		

Glare 眩光			
建議款式	01 ,02 ,11 ,12 ,533		

Macular Degeneration 黃斑部退化	中心視野缺損、增強對比、減少反光		
建議款式	01 ,11 ,51 ,55,61,65		

※備註：

以上“建議款式”僅供參考。實際請依照醫師囑咐或親身試用。以達到最適效果。



常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llaid.com.tw

英國製造 專業光學

COIL 放大鏡組

COIL 的放大鏡是專為弱視者設計，它擁有輕巧、精緻的外型並且搭配一體成型的強化塑膠外殼讓使用者方便攜帶。其鏡片是使用非球面鏡片以降低像差和增加透光率以利於閱讀。部分款式更可以搭配 LED 燈泡做為照明輔助，LED 燈泡較一般燈泡有更高的明亮度及更低的耗電量，它的不發熱特性更是適合做為放大鏡使用。

		
口袋型照明放大器 倍率：3X ~ 11X 直徑：40 ~ 44mm	ATMAX 觸控 LED 放大鏡組 倍率：3X ~ 11X	LED 照明放大鏡鏡頭組 倍率:2.8X ~ 14.7X
		
高功能盤狀放大器(圓形) 倍率：3X ~ 6X 直徑：50~81mm	文鎮放大鏡 倍率:5x~7x 直徑：65mm	站立固定式放大鏡 倍率：3X ~ 20X 直徑：44~81mm

新品上市

常業企業股份有限公司

公司地址：(捷運忠孝新生站 2 號出口)
100 台北市忠孝東路二段 130 號 9 樓之 7

電話：(02)-2397-0197
傳真：(02)-2393-7852



常業企業股份有限公司
Long Leaves Enterprise CO., LTD.

電話：(02)23917-0197

地址：台北市忠孝東路二段 130 號 9 樓之 7

www.llaid.com.tw

Specwell 日本原裝 超短焦望遠鏡

Specwell 超短焦望遠鏡，是目前世界上最獲好評的低視能專用望遠鏡。鋁合金精鑄的外體，重量輕盈且持握順暢；多層鍍膜的反射鏡片，影像清晰不反光且對焦系統細膩。若是搭配鏡架、鏡夾、握環等專屬配件使用，其功能性更是遠超過仿間任一款同類型望遠鏡。它的優越，就等您來體驗！

M0309 3X	M0410 4X	M0412 4X	M0616 6X	M0725 7X	M0820 8X	M0830 8X	M1030 10X	M1020 10X	M1420 14X
最短距 22cm	22cm	22cm	25cm	50cm	30cm	60cm	70cm	40cm	60cm
重量 30g	32g	56g	80g	154g	77g	170g	180g	84g	100g





常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llajds.com.tw
(02)2397-0197

台北市忠孝東路二段 130 號 9 樓之 7
longleav@ms10.hinet.net

Specwell 日本原裝 超短焦距望遠鏡

M100 握持式望遠鏡



型號	M2758	M0309	M0410	M0412	M0616 E	M0616W	M0725	M0820	M0830	M1020	M1030	M1420
倍率	2.75	3	4	4	6	6	7	8	8	10	10	14
口徑	8mm	9mm	10mm	12mm	16mm	16mm	25mm	20mm	30mm	20mm	30mm	20mm
視野 角度	12.5°	12.5°	10°	12.5°	10°	10°	10°	7°	8.5°	6°	6°	3.5°
長度	45mm	46mm	53mm	51mm	70mm	74mm	119mm	91mm	130mm	106mm	150mm	140mm
重量	30g	30g	32g	56g	72g	80g	154g	77g	170g	84g	180g	100g
最短 視距	150m m	220mm	220m m	220mm	250mm	260mm	500mm	300mm	600mm	400mm	700mm	600mm



常業企業股份有限公司
Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.lladds.com.tw
(02)23970197

台北市忠孝東路二段 130 號 9 樓之 7
longleav@ms10.hinet.net

Specwell 日本原裝專業檢測鏡

本產品能為光電、半導體、生醫、紡織、食品產業的品管提供最精確的檢測效果


M200 站立式檢測鏡

兩種量測規格

刻度式1/20mm比例(M830/820-S)



方格式1/10mm比例(M820-SM)

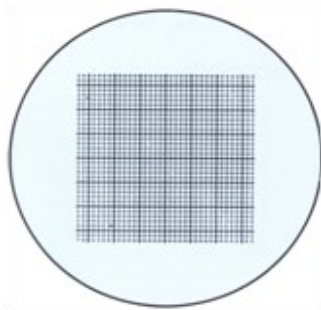

十字形及網形的量測結構，再搭配附贈的觀測套筒。造就一組既實用又便利的檢測裝備。可大幅提升作業人員及工程師的精準度及效率。



型號	M830-S	M820-S M820-SM
放大倍率	25x	25x
視域	11.0mm	9.0mm
工作距離	66mm	69mm
高度	226mm	180mm
重量	235g	100g
望遠鏡倍率	8x	8x
望遠鏡可視角	8.5°	6.5°



常業企業股份有限公司
Long Leaves Enterprise CO., LTD.



www.lladds.com.tw
(02)23970197

台北市忠孝東路二段 130 號 9 樓之 7
longleav@ms10.hinet.net

Specwell 日本原裝專業檢測鏡

本產品能為光電、半導體、生醫、紡織、食品產業的品管提供最精確的檢測

M-300 超短焦距觀測鏡

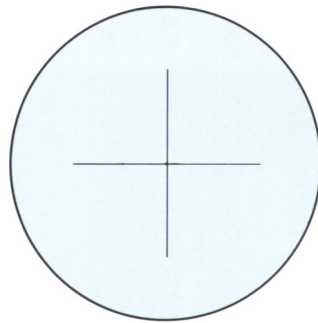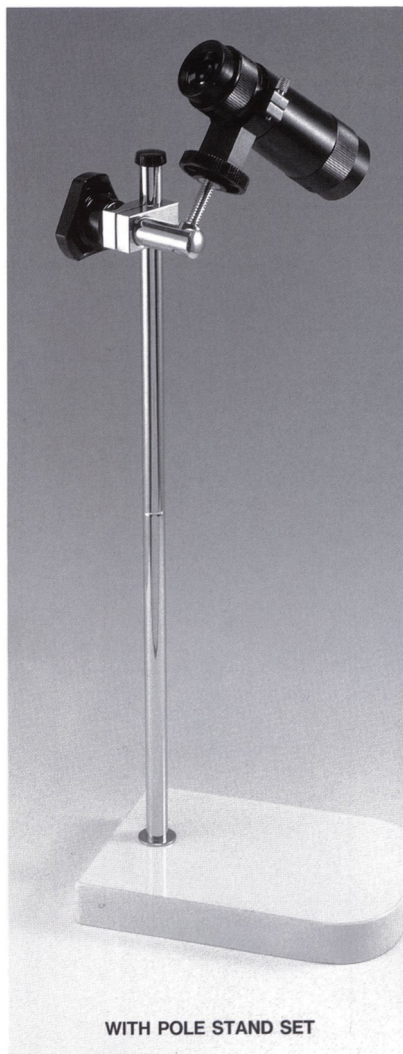

十字形的對焦準心，再搭配觀測支架。造就一組既實用又便利的檢測裝備。可大幅提升作業人員及工程師的精準度及效率。



型號	M820-C
放大倍率(加裝觀測套筒)	25x
視域(未加裝觀測套筒)	23mm
視域(加裝觀測套筒)	8mm
最短焦距	300mm
高度(未加裝觀測套筒)	91mm
重量(未加裝觀測套筒)	90g
望遠鏡倍率	8x
望遠鏡可視角	6.5°

Specwell 檢測鏡。日本原裝進口。組合式鋁合金鏡體，體積輕巧、耐用可靠。每組皆附保護套，收納攜帶方便。是您工作上的首選。




常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llaims.com.tw

手持/頭戴放大鏡組

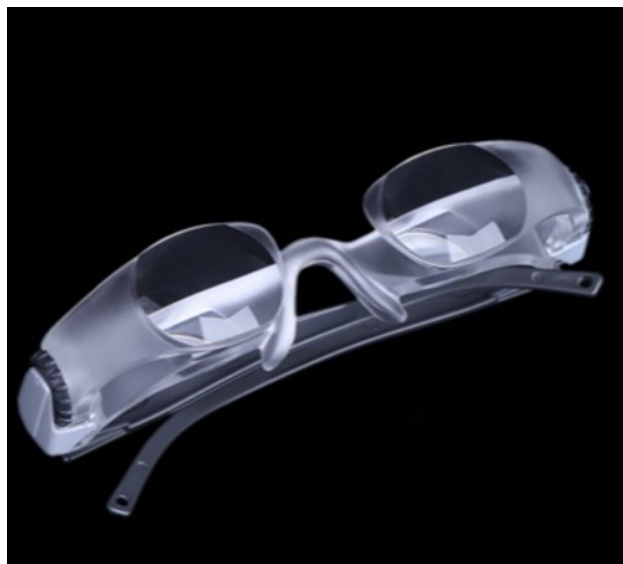

功能與規格	Besser 放大鏡
放大倍率	3.5x, 50mm x75mm
鏡面直徑	5x, 60mm
	6x, 5.6mm
	7x, 50mm
	8x, 35mm
	10x, 35mm
	12x, 35mm
	14x, 35mm
	LED 輔助燈；4 號電池 3 顆

功能規格	Max TV
放大倍率	2.0x
焦距	看遠型：3 公尺
焦距	看近型：30~35 公分
重量	30~45g
調焦	轉盤式，左右眼各一
材質	塑膠

常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO.,LTD.

www.llaims.com.tw

單/雙眼望遠鏡

功能與規格	單眼短焦望遠鏡
	10x25 ■30 英寸尼龍頸線 ■軟清潔布 ■橡膠鏡頭蓋 ■橡膠眼罩用於正常觀看或翻轉
	8x21 ■30 英寸尼龍頸線 ■軟清潔布 ■橡膠鏡頭蓋 ■橡膠眼罩用於正常觀看或翻轉
	7x25 ■30 英寸尼龍頸線 ■軟清潔布 ■橡膠鏡頭蓋 ■橡膠眼罩用於正常觀看或翻轉
	6x16 ■30 英寸尼龍頸線 ■軟清潔布 ■橡膠鏡頭蓋 ■橡膠眼罩用於正常觀看或翻轉
	4x12 ■30 英寸尼龍頸線 ■軟清潔布 ■橡膠鏡頭蓋 ■橡膠眼罩用於正常觀看或翻轉



功能規格	雙眼望遠鏡
放大倍率	8x
焦距	看遠：∞
焦距	看近：250 公分
重量	300g
特點	防水
材質	塑膠

常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司
Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llaims.com.tw

Zimmerman 視力模擬眼鏡組

Zimmerman 模擬鏡	內容
	◎ 10 片模擬鏡片。
	◎ 4 副頭帶式眼鏡。
	◎ 2 副眼罩。
	◎ 0.1 視力值。
	◎ 0.05 視力值。
	◎ 視網膜剝離。
	◎ 5。視野值。
	◎ 黃斑部病變。
	◎ 飛蚊症。
	◎ 視網膜色素變性。
	◎ 眼底出血
	◎ 光感
	◎ 白內障。

自 1979 年以來，Zimmerman 低視力模擬套件已被全世界數以千計的視力正常人士使用，以更好地了解視力障礙或低視力的功能影響。

這些視覺模擬器是在進行有關視覺障礙和低視力主題的在職、研討會或演示目的時使用的絕佳設備。

該套件包含護目鏡和可互換的視力和視覺病理學模擬，以及周邊視野限制模擬，讓家人、朋友、同事和與低視力個人一起工作的人能夠更好地了解低視力對行動能力的影響、學習、就業和日常生活活動。

常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七
(捷運忠孝新生站二號出口)

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



常業企業股份有限公司
Long Leaves Enterprise CO.,LTD.

www.llaid.com.tw

新品上市

木質閱讀書架



△木製材質體現簡約、自然風格。

△可放置書籍、平板電腦等。

△背部支撐架可依個人需求調整最適合的角度放置，共有 13 段調整模式。

△書架下方的橫條附有簡易鎖定功能，增加使用時的安全與便利。

△橫條兩側附有黑色彈性細條，閱讀時可固定書籍頁面。



名稱	木製立書架
尺寸	長 40.7 公分 X 寬 28 公分 X 高 4.2 公分
材質	中密度纖維板 (MDF)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 (ABS)、鋼、聚氯乙烯(PVC)
產地	南韓

常業企業股份有限公司

公司地址：(捷運忠孝新生站 2 號出口) 電話：(02)-2397-0197
100 台北市忠孝東路二段 130 號 9 樓之 7 傳真：(02)-2393-7852



常業企業股份有限公司

Long Leaves Enterprise CO., LTD.

www.llaid.com.tw

新品上市

手有寶—手機放大器

- ◎ 重量: 325g
- ◎ 尺寸: 185 x 131 x 27.5 mm
- ◎ 視覺距離: 1米
- ◎ 放大倍率: 2.5倍
- ◎ 適合場所: 手持、掌上
- ◎ 用途: 適用6.5吋以下智慧手機
- ◎ 標配: 遊戲專用把手一組



智

慧手機及平板已成為現代人日常生活中的必需品了。無論工作或日常生活及娛樂都有它的身影。從每天睡醒睜開眼算起，好幾個小時以上都須和3C產品共處，也因為如此，造成了身體一些負擔，其中影響最大的就屬眼睛與肩頸發生病變。

說到眼睛的病變當然要屬藍光的刺激以及近距離用眼所造成的傷害為最。藍光的刺激目前可用螢幕

提供的護眼模式、防藍光貼片、不要再暗室中使用，或多或少都有一些成效，但唯獨近距離使用3C產品是很難避免的一件事。最近，國內廠商研發出一款專為智慧手機或平板，可增長視覺距離的用品。運用鏡面反射的原理影像來達到增長像距的目的。

手有寶—手機放大器運用兩面專利鍍膜的反射鏡，不產生多於眩光、成像不扭曲，並達到放大手機螢幕2.5倍，模擬視覺距離約1公尺的效果。因為這兩面反射鏡可交互調整，所以能讓手機使用人的視角可以提高30°；不用再當「低頭族」，對頸椎壓力也能有效舒緩。

智慧手機所帶來的便利，使我們與它幾乎形影不離，但相對的也會造成我們眼睛的傷害，這些傷害往往都是不可逆的。所以平時，我們就必須注意眼睛的保護。唯有健康的視力，才有生動且充滿活力的生活，不是嗎？



雙手操作

單手操作



給你最舒適的遊戲體驗



橫屏操作



直屏操作



常業企業股份有限公司

公司地址：(捷運忠孝新生站2號出口)
100 台北市忠孝東路二段130號9樓之7

電話：(02)-2397-0197
傳真：(02)-2393-7852

電腦軟體輔具



LONG LEAVES

常業企業股份有限公司

— Flowy Ai 智慧功能電腦放大軟體

- ◇ 多合一 Ai 互動式放大鏡和螢幕閱讀解決方案，適用於低視力控制面板。簡單易用

Screen Reader



Highlight

The function lets you easily locate the Mouse Pointer and Cursor.

Cash on hand (beginning of month)	Apr 23	May 23
	\$10,000.00	\$8,000.00
Cash receipts		
Cash sales	\$2,500.00	\$3,000.00
Refunds and allowances		
Collections on accounts receivable		
Interest, other income		
Loan proceeds		
Owner contributions		
Other income		

光標—

更明顯的滑鼠指標



Text View

Text View displays information in color contrast and OCR & TTS integrated.

Jan 23 (beginning of month)	\$10,000.00	\$8,000.00
receipts		
Cash sales	\$2,500.00	\$3,000.00
Refunds and allowances		
Collections on accounts receivable		
Interest, other income		
Loan proceeds		
Owner contributions		
Other income		
Total cash receipts	\$2,500.00	\$3,000.00

文本檢視—

只需將滑鼠指向文字，
flowy AI 將特意標示文本
並朗讀



Magnifier

Virtual Magnifying Glass, navigate with the mouse.

Cash flow forecast	Jul 23	Aug 23
	\$590,000	\$600,000

放大鏡—

可隨滑鼠移動的螢幕放大



Full Zoom

Magnify the entire screen. Navigate with arrow keys and mouse.

Cash flow forecast	Jul 23	Aug 23
	\$590,000	\$600,000

全螢幕放大—

依照個人偏好放大全螢幕

All-In-One AI Interactive Video Magnifier & Screen Reading Solution for low vision!
The control panel is simple and easy.
Click on the icons or use short keys to initiate.
Hand gesture commands, OCR, TTS, and much more.

AI Video Magnifier



Finger Tracking



Magnification Lock



Zoom Out



Flowy AI 可追蹤您的指尖，將文本放大、更換顏色



常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七
(捷運忠孝新生站二號出口)

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852





公司地址：www.lladds.com.tw
 北市忠孝東路二段 130 號 9 樓之七
 (捷運忠孝新生站二號出口)
 電話:(02) 2397-0197
 傳真:(02) 2393-7852

乾隆方陣——點字轉譯編輯軟體




乾隆方陣是一套極為便利的點字轉譯軟體。即使完全不懂點字的您，也可輕鬆地將國字或英文轉譯成點字。因為，乾隆方陣的介面可同時顯示文字、注音及點字，方便使用人校正或對照。若是遇到編輯數理點字時，我們還提供了插入數學點字及上位點字的功能。必要時，還提供手動點字輸入的方式繕打或修正的功能。

乾隆方陣提供了排版功能，可設定點字行距、每行方數、行數及紙張大小。讓點字檔案無論複製成任何一種檔案格式後不需再做調整。在校正點字時若發現錯誤也不用擔心，只要將錯誤之處用注音或點字改正即可。

乾隆方陣可將轉譯完成後的內文另存成.txt 或 .brl 格式檔案，作為其他使用。

乾隆方陣提供了 Window 10 或 Windows 7 兩種系統版本。

功能	乾隆方陣
系統	適用系統 Window 10。USB 安裝鎖一支。
	將國字或英文轉譯成點字碼。
數理點字	具數學點字及上位點字。
編輯	可設定點字行距、每行方數及行數。
設定	可設定紙張大小。
顯示	有國字、注音與點字的對照區，可作為校對。
校正	可用注音或點字校正錯誤。
存檔	可作為排版之用。並另存成.txt 或 .brl 檔

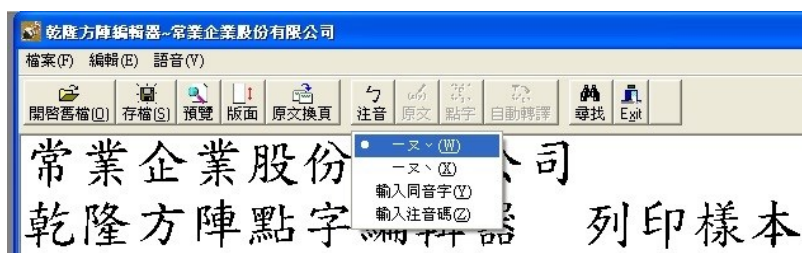

常業企業股份有限公司

公司地址：
 台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七
 (捷運忠孝新生站二號出口)
 電話: (02)-2397-0197
 傳真: (02)-2393-7852

有聲輔具



LONG LEAVES

常業企業股份有限公司

www.llaid.com.tw

SensePlayer OCR 史上功能最強大的多媒體撥放器

SensePlayer OCR 是一款先進、易於訪問的多媒體播放器、高品質現場錄音機、適用於智慧型手機和平板電腦的手持式觸覺鍵盤以及定制的便攜式 OCR 設備，所有這些都集成在一個比大多數現代智慧型手機更小、更輕的裝置中。先進的功能和現代的 Android 作業系統，搭配專為視障人士設計的經典觸覺鍵盤，為 SensePlayer 帶來您喜愛的簡單性，同時又不影響功能。

SensePlayer 不只是普通的多媒體播放器。透過內建螢幕閱讀器，您可以存取 NLS Bard、Audible 和其他您喜愛的第三方應用程式。使用適合手掌的觸覺鍵盤，閱讀和播放各種支援的文件類型中您喜愛的文件和媒體。存取網路廣播、下載書籍、進行高保真錄音、連接和控制您的行動裝置等等。

SensePlayer 可支援多款多媒體串流服務，包括 Netflix、Spotify、Apply Music、Audible 等。



	SensePlayer
體積/重量	64x130x14.5mm ; 140g
內建實際容量	43GB
支援記憶卡擴充	Micro SD 256GB
Wi-fi / 藍芽 / FM	支援
支援文件及影音格式	TXT, RTF, HTML, HTM, XML, DOC, DOCX, PDF, EPUB, MP3, MP4, WAV, WMA, WMV, OGG, ASF, AAC, AVI, FLAC, 3GP, MPG, M4A, DAISY
內建鏡頭	1300 萬畫素；支援中文識別
FM 收音機	Yes。
網路收音機	台灣地區電台
Podcast	Yes
裝置連接	智慧型手機
影音串流平台	Netflix、Spotify、Apply Music、Audible 等

常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七
(捷運忠孝新生站二號出口)

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



LONG LEAVES

常業企業股份有限公司

www.llaid.com.tw

視障朋友的良伴—博朗聽書機 E10



◎ **E10** 是一款支援電子書閱讀、mp3/wma 播放、FM 隨身聽、錄音、wi-fi 連結等功能的多媒體播放器。

◎選單的選項內容有語音導覽的功能，滿足盲友使用的需求。

◎最新支援 doc/docx、PDF、Daisy、TXT、HTML 等多種電子書格式

◎可以選擇語調、語速及男女聲

◎內建 4G 記憶體，並可擴充記憶達 32G

◎ wi-fi 連結後，另有網路電台、播客、雲端儲存等收聽內容。

規格說明

- 1、連接 WIFI，線上或下載聽書，共用網路資源。
- 2、聽網路播客，內容即時更新。
- 3、聽網路電臺，各地電臺隨意聽。
- 4、有網路磁片，線上或下載聽。
- 5、支援多種音訊及視頻格式檔，方便聽音樂，聽電影。
- 6、支持多種電子書格式，自由選擇普通話及方言(廣東話、台話、四川話、湖南話、河南話)，且語速、語調可調。
- 7、機身帶三種顏色和觸點，易於盲人或低視力使用。
- 8、內置記憶體和 SD 卡擴展功能，並支援記憶體和 SD 卡之間互相拷貝檔。更具有 USB OTG 介面，連接 U 盤。
- 9、具有語音提醒及語音提醒功能。



常業企業股份有限公司

公司地址：

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



LONG LEAVES

常業企業股份有限公司

生活用品系列

www.llaid.com.tw



常業企業股份有限公司

台北市忠孝東路二段 130 號九樓之七
(捷運忠孝新生站二號出口)

電話: (02)-2397-0197

傳真: (02)-2393-7852



圖右:中文語音鬧鐘:鬧鈴、報時、氣溫

圖左:中文語音錶

圖下:男女點字錶(瑞士製)

項次	項目名稱	補助金額 低收/中低收/一般	年 限	評估	備註
五八	視障用白手杖或杖頭	700/525/350	二	不須評估	
五九	收錄音機或隨身聽	1000/750/500	三	不須評估	擇一申請
六〇	聽書機	3500/2625/1750	五	不須評估	
六一	視障用點字手錶	3000/2250/1500	三	不須評估	擇一申請
六二	視障用語音報時器	300/225/150	三	不須評估	
六三	特製眼鏡：(含特製隱形眼鏡)	6000/4500/3000	三	眼科或中心	◎18歲以下得2年申請一次
六四	角膜疾病類隱形眼鏡	10000/7500/5000	三	眼科證明	◎醫材許可證號
六五	包覆式濾光眼鏡	4000/3000/2000	二	眼科或中心	具光覺者
六六	望遠鏡	3000/2250/1500	四	眼科或中心	
六七	放大鏡-低倍率	400/300/200	三	不須評估	2.5x、10D以下
六八	放大鏡-高倍率	2500/1875/1250	三	眼科或中心	2.5x、10D以上
六九	點字板	1000/750/500	一 〇	不須評估	
七〇	點字機(打字機)	32000/24000/16000	七	中心	
七一	點字觸摸顯示器-20方以下	50000/37500/25000	四	中心	(擇一申請) 具點字辨讀能力
七二	點字觸摸顯示器-20方以上	70000/52500/35000	四	中心	
七三	可攜式擴視機	40000/30000/20000	四	中心	
七四	桌上型擴視機	75000/56250/37500	六	中心	
七五	視障用螢幕報讀軟體	12000/9000/6000	四	中心	
七六	視障用螢幕放大軟體	18000/13500/9000	四	中心	
七七	語音手機-簡易型	2000/1500/1000	三	不須評估	(擇一申請)
七八	語音手機-智慧型	8000/6000/4000	三	中心	NCC合格字號
一〇九	語音血壓計	2000/1500/1000	三	不須評估	一戶申請一台 (醫材許可證號)
一七三	語音體溫計	1800/1350/900	三	不須評估	
一七四	語音體重計	1000/750/500	三	不須評估	
二三三	義眼(片)	10000/7500/5000	五	眼科	雙側補助x2

※輔具補助，每人每二年度以補助四項為原則。同一項目於其使用年限內不得重複補助。但輔具屬其他機關(構)移轉使用或回收再利用者，得不計入補助項次計算。

※輔具使用未達最低使用年限、申請項目已逾前條第三項規定，或未符合補助資格，因特殊情形而具急迫性確有使用需求者，申請人得專案提出申請。